


VECTOdrill™.

Condición previa óptima para la estabilidad primaria y una osteointegración fiable.

Por supuesto de Thommen Medical.

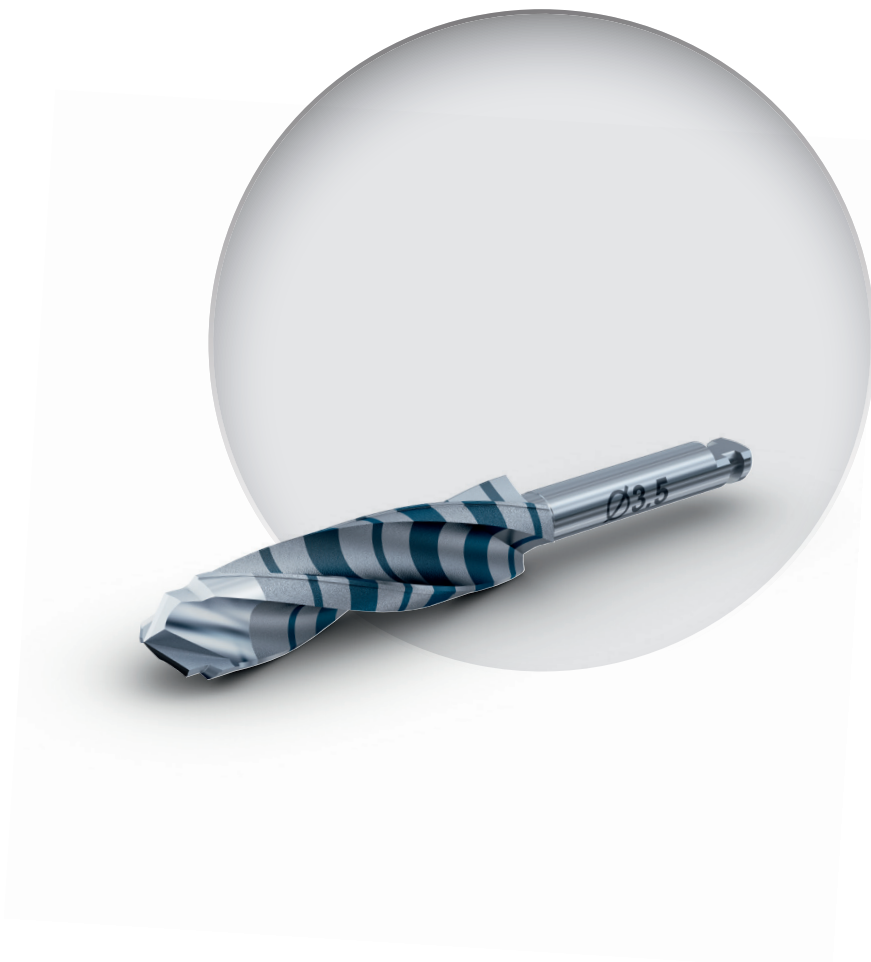


Pionero.

El exclusivo sistema VECTOdrill™, compuesto por fresas perfectamente armonizadas entre sí, permite la preparación atraumática del hueso y crea las condiciones óptimas para la estabilidad primaria y una osteointegración fiable.


«El trabajo resulta sencillamente agradable. El guiado de las fresas es preciso, con una estabilidad de marcha excelente para una osteotomía perfecta.»

PD Dr. Dr. med. D. Rohner, CFC Hirslanden, Aarau

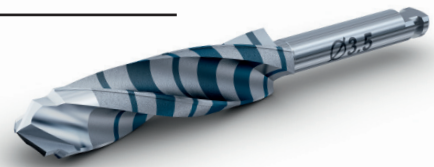

Fresado piloto

- **sin marcado**
Definición de la posición del implante mediante la punta de centrado
- **preciso**
determinación de la profundidad y del eje de fresado mediante la fresa piloto
- **eficaz**
excelentes propiedades de corte

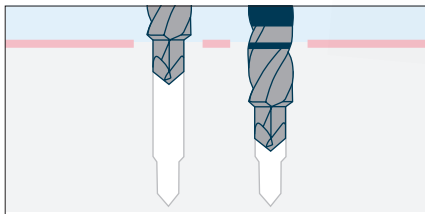

Preparación secuencial

- **controlada**
La punta de guía posiciona la fresa de manera segura en el orificio taladrado por la fresa anterior
- **guiada**
a lo largo del eje de fresado definido
- **marcha silenciosa**
geometría de fresa de varios labios



Implante autorroscante

- **sin presión**
congruencia perfecta entre el lecho del implante y el diámetro del núcleo del implante
- **estabilidad primaria excelente**
los flancos autorroscantes de la rosca fijan el implante en el hueso

Las exclusivas fresas VECTOdrill™ crean, junto con los implantes autorroscantes y la superficie superhidrófila INICELL®, las condiciones óptimas para una osteointegración fiable.

Línea de productos VECTOdrill™

Fresas VECTOdrill™ para un único uso

Acero inoxidable



- Listas para usar

Desechables



Estériles a la entrega.

Longitudes disponibles:
29 mm, 34 mm, 40 mm

Fresas VECTOdrill™ para varios usos

Acero inoxidable



- Reutilización rentable
- Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión

Varios usos
máx. 20 ciclos de reacondicionamiento*

No estériles a la entrega.
Se deben reacondicionar antes
de cada uso

Longitudes disponibles:
29 mm, 34 mm, 40 mm

Fresas de cerámica VECTOdrill™ para varios usos

Cerámica mixta ATZ de alta calidad
(alumina toughened zirconia)



- Excelente biocompatibilidad
- Extraordinaria resistencia al desgaste
- Sobresaliente resistencia a la corrosión

Varios usos
máx. 20 ciclos de reacondicionamiento*

No estériles a la entrega.
Se deben reacondicionar antes
de cada uso

Longitudes disponibles:
29 mm, 34 mm

* Un ciclo de reacondicionamiento se corresponde con el uso de la fresa en un paciente (cirugía, limpieza y esterilización). las instrucciones de preparación THM61131, «www.ifu-tm.com/THM61131».

HEADQUARTERS

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suiza
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

FILIALES/DISTRIBUIDORES

ALEMANIA

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Alemania
Tel. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de

AUSTRIA

Thommen Medical Austria GmbH
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | Austria
Tel. +43 660 2011953
info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Países Bajos
Tel. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl

CERCANO ORIENTE

Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berna | Suiza
Tel. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
starscience@bluewin.ch

CHEQUIA

C. Witt Dental spol. s r.o.
Cihlářská 643/19
602 00 Brno
Tel. +420 739 043 449
helena.novak@cwittdental.cz

CHINA

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District
Shanghai | China
Tel. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

COREA DEL SUR

KMbio
02 Ho, 129, Dongseo-daero
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheonnam-do
Republic of Korea
Tel. +82 070 3141 2875
kmbio149@naver.com

CROACIA

Futura Dental d.o.o.
Kralja Zvonimira 108
10 000 Zagreb | Croacia
Tel. +385 91 6814 860
info@futura-dental.hr
www.futura-dental.hr

ESPAÑA/PORTUGAL

Thommen Medical Ibérica
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | España
Tel. +34 96 536 10 20
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com

ESTADOS UNIDOS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tel. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax +1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com
orders.us@thommenmedical.com

FEDERACION DE RUSIA

CIS – JSC Geosoft
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tel. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDIA

Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlandia
Tel. +358 400 940 700
labs@vektor.fi

FRANCIA

Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | Francia
Tel. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr

HONG KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hong Kong
Tel. +852 530 876 41

ITALIA

Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana, Predappio (FC) | Italia
Tel. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dental Trey.it
www.dentalTrey.it

JAPON

J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japón
Tel. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com

LITUANIA/LETONIA

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas
Lituania LT-49191
Tel. +370 37 201072
Mobile +370 65 771550
info@cmp.lt
www.cmp.lt

NORUEGA

Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo | Noruega
Tel. +47 951 07 007
post@novusdental.no
www.novusdental.no

POLONIA

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Polonia
Tel. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl

SINGAPUR

FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapur 415937 | Singapur
Tel. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com

SUIZA

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suiza
Tel. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.
Taipei, 103 Taiwan
Tel. +886 2 2585 1669
Fax +886 2 2585 0892
enjye168@gmail.com

TURQUIA

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 İstanbul | Turquía
Tel. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr