

Clever

Dynamic Tibase® : pour les couronnes transvissées avec rattrapage d'axe



**Dynamic
Tibase®**

Driven by science, not trends.

Dynamic Tibase® pour Thommen Medical

Flexibilité et autonomie dans le choix de la partie prothétique

Ne laissez plus l'axe de l'implant décider du choix de la réalisation prothétique à votre place. Dynamic Tibase® est parfait pour les restaurations vissées esthétiques et exigeantes. Dynamic Tibase® permet d'anguler le puits de vissage jusqu'à 35 degrés indépendamment de l'axe de l'implant. Vous pouvez ainsi réaliser des restaurations vissées, même dans des cas où il était nécessaire de réaliser des couronnes scellées.

Des bibliothèques CAD/CAM accompagnent le flux de travail numérique.
Consultez notre site www.thommenmedical.com


3shape

exocad


dental wings



Situation osseuse

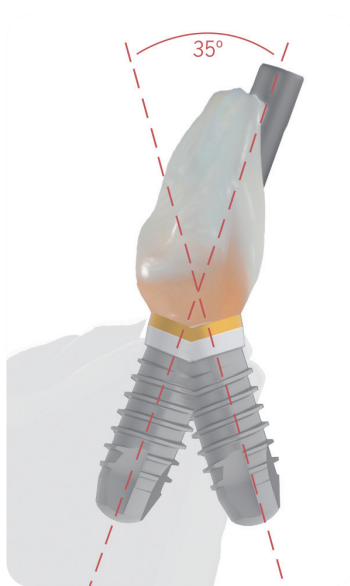



Position idéale

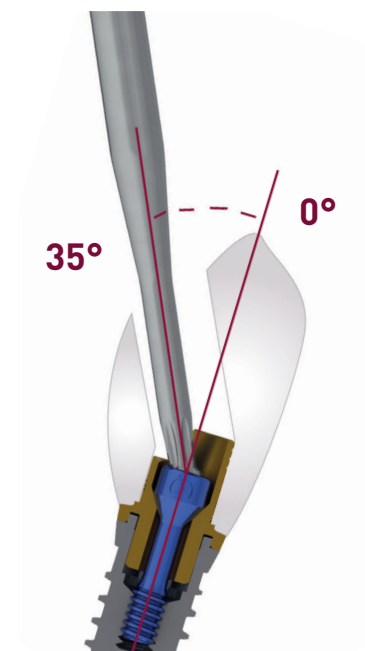

Solution
Dynamic Tibase®
Alliage en titane, anodisé

Fiable

L'entraînement par vis à 6 lobes permet une fixation sûre de la restauration et autorise une angulation jusqu'à 35°.

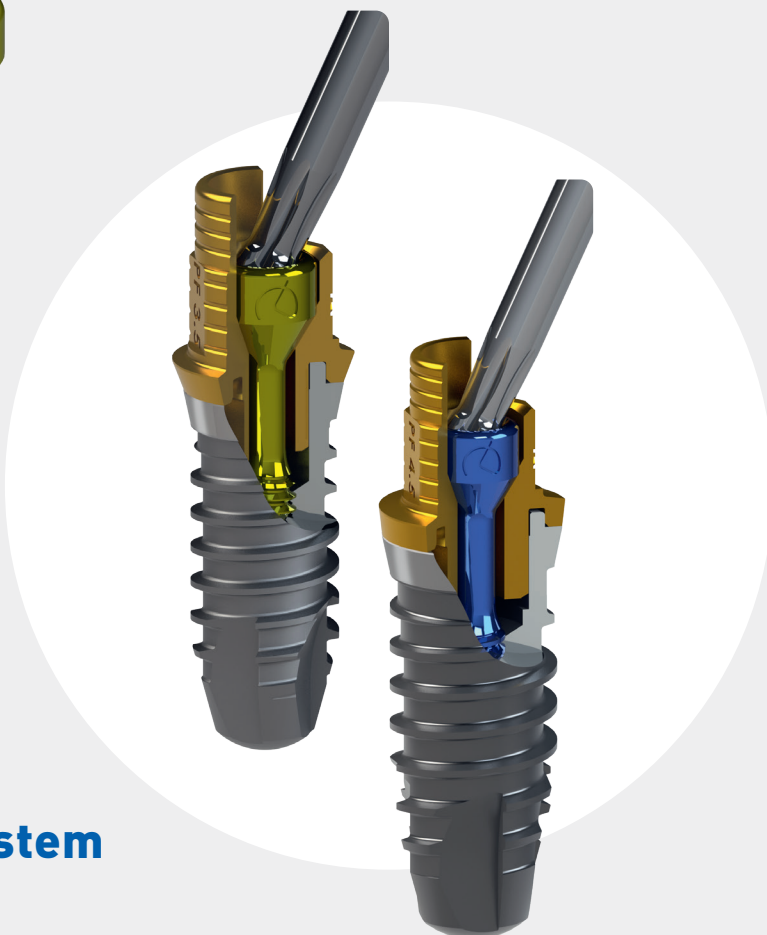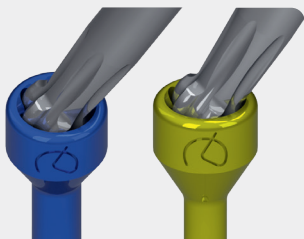

Flexible

- Pour les couronnes et bridges
- Deux types de pilier : standard et à longueur ajustable
- Rainures de rétention circulaires pour les réalisations temporaires



Standard




Ajustable

Captive system intelligent


Si la vis est insérée avant le collage.

- Canal de vis de petit diamètre \varnothing 2.0mm
- Le captive system permet de réduire le puits de vissage à 2 mm et permet ainsi d'augmenter le volume et la robustesse de la suprastructure
- La surface occlusale est ainsi augmentée (exemple : occlusion)

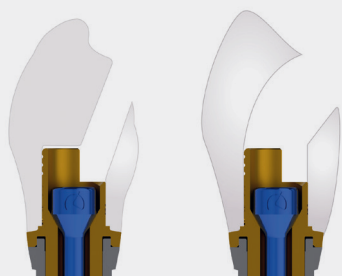

Captive System

Standard System

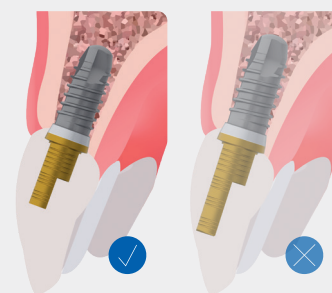

Ajustable

Le cylindre à hauteur ajustable permet un soutien optimal de la céramique.

- Pour les implants très enfouis ou les couronnes de grande hauteur en fonction de la situation clinique
- Soutien optimal de la suprastructure
- Adapté aux restaurations temporaires

Distributeur

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suisse
Tél. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

Fabricant

Talladium España, S.L.
Avenida Blondel, 54, 3º
25002 Lleida | Espagne

